




QMS

MEDICOSMETICS

DERMA EXPERT
LED FÉNYTERÁPIA

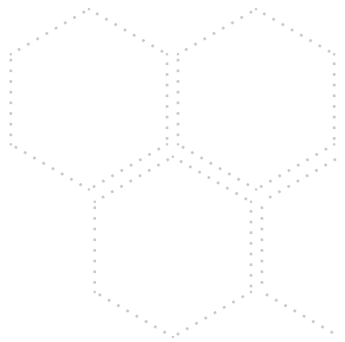

MEDI SKIN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA



A készülék felhasználóinak a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék használata előtt feltétlenül el kell olvasniuk és meg kell érteniük a felhasználói kézikönyvben található összes információt.

Tartsa be a felhasználói kézikönyvben található összes utasítást.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen észrevétele van a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülékkel vagy ezzel a használati útmutatóval kapcsolatban, vagy ha olyan mellékhatásokat tapasztal, amelyek nem szerepelnek ebben a használati útmutatóban, vagy amelyek súlyosabbak, mint a használati útmutatóban leírtak.

qmsmedicosmetics.com

✉ **headoffice@qmsmedicosmetics.com**

RP: Certainty IP Ltd, Dublin, D18 CV48. +353 1582 9003



A jelen dokumentumban szereplő információk az iSMART Developments Limited tulajdonát képezik, és azzal a feltétellel kerülnek átadásra, hogy a felhasználók bizalmasan kezelik azokat, és az iSMART Developments Limited írásos hozzájárulása nélkül nem sokszorosíthatók és/vagy nem használhatók fel kereskedelmi célokra.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

TARTALOM

Kinek ajánlott a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA alkalmazása?	5
Bevezetés	5
Készülék ismertetése	6
Rendeltetésszerű használat	7
Ellenjavallatok, figyelmeztetések és óvintézkedések	7
Ellenjavallatok	7
Figyelmeztetések	8
Általános biztonság	9
Óvintézkedések	9
Kockázatok és kedvező hatások	10
Lehetséges kockázatok	10
Várható kedvező hatások	10
Első használatba vétel	11
DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS arcmaszok kicsomagolása és feltöltése	11
DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK feltöltése	11
DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK csatlakoztatása a vezérlőhöz	11
Bőr érzékenységi vizsgálat	12
A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS ARCMASZK használata	12
Kezelésre vonatkozó ajánlások	12
A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS ARCMASZK felhelyezése	12
A kezelés kivitelezése	13
Tisztítás és karbantartás	13
DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK tisztítása	14
Hulladékkezelés	14
Hibaelhárítás	14
Címke	15
Műszaki specifikációk	15
Szimbólumok jelentése	16
Garancia	17
Általános garancia	17
Garanciát érvénytelenítő körülmények	17
Mit a teendő, ha a készüléke hibás	18

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA alkalmazása előtt el kell végeznie a bőrzékenységi tesztet, és várnia kell 6 órát.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

Köszönjük, hogy a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS arcmaszkot választotta. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA kizárólag felnőttek számára ajánlott, akik az arc egészén található ráncokat kívánják kezelni.

Ha megvásárolta a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, és úgy találja, hogy az NEM megfelelő Önnek, kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, hogy 30 napon belül visszaküldje a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.

BEVEZETÉS

Ahogy öregszünk, bőrünk egyre vékonyabbá, szárazabbá és rugalmatlanabbá válik, mivel csökken annak kollagéntermelése. Az öregedés jelei, mint például a ráncok és a feszség elvesztése, láthatóvá válnak. A hiperpigmentáció és az öregedéssel járó foltok is gyakoriak. Az öregedés során a bőr vastagsága 20-80%-kal is csökkenhet.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS arcmaszok a klinikailag igazolt és megbízható 630 és 830 nm-es hullámhosszakat kombinálja az 1070 nm-es hullámhossz további előnyeivel. A 630 nm-es és 830 nm-es tartományban lévő fény a klinikai vizsgálatok szerint serkenti a kollagén- és elasztintermelést, valamint a fotobiomodulációnak nevezett folyamat révén csökkenti az arc ráncait, javítja a véráramlást és a szövetek oxigénellátását.

Az 1070 nm-es tartományban lévő fény bizonyítottan stimulálja a szervezet saját természetes védekező és regeneráló mechanizmusait támogató folyamatokat; kísérletek során bebizonyosodott, hogy javítja a bőr általános állapotát, csökkenti a szem alatti táskákat és a puffadságot, valamint egyenletesebbé teszi a bőr textúráját és tónusát.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KEZELÉST úgy fejlesztették ki, hogy a fényt közvetlenül a bőrbe juttassa, így biztosítva, hogy a fény maximális mennyiségben érje el a sejtszintű célpontokat.

A készülék felhasználói csak akkor élvezhetik a készülék használatából származó előnyöket, ha elolvassák és megértik és maradéktalanul betartják a használati útmutatóban található összes információt.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK a következőket tartalmazza:

1. Rugalmas szilikon LED-es arcmasz
2. Vezérlő (lítium elemet tartalmaz)
3. Tápegység ország-specifikus adapterekkel
4. 2 szilikon fejpánt
5. Selyem tárolózsák
6. Használati útmutató
7. Szemvédő*

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS arcmasz egy otthoni használatra alkalmas, arcra helyezhető LED-es fényterápiás készülék. A készülék egy rugalmas szilikon maszkból áll, amely fénykibocsátó diódákat (LED-eket) és egy vezérlőt tartalmaz. A LED-ek hozzák létre a fényt. A maszkot az arcra kell helyezni, és állítható tépőzáras pántok tartják a helyén.

A LED-ek a látható spektrumban vörös (630 nm +/- 10 nm) és infravörös (830 nm +/- 10 nm) és (1070 nm +/- 20 nm) fényt bocsátanak ki az arc ráncainak és a szem körüli öregedés jeleinek kezelésére. A készülék egy nem termikus mechanizmuson, az úgynevezett fotobiomoduláción keresztül működik.

A vezérlő bekapcsolja/kikapcsolja a LED-eket, és szabályozza a maszk áramellátását. A vezérlő újratölthető lítium-ion polimer akkumulátort tartalmaz. A vezérlő egy 3 mikro-LED-ből álló látható kijelzőt használ, amely a felhasználó számára mutatja az eszköz akkumulátor töltöttségi állapotát. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot egy USB csatlakozóval csatlakoztathatja a vezérlőhöz.

A tápegység a lítium akkumulátor töltésére szolgál, és egy 2 vagy 3 tűs csatlakozódugón keresztül csatlakoztatható egy megfelelő konnektorhoz. A tápkábel egy szabványos USB C csatlakozóval csatlakozik a vezérlőhöz. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék töltés közben nem működtethető.

A berendezés nem használható semmiféle mérés elvégzésére, illetve a kezelésre utaló indikációkkal kapcsolatos következtetések levonására. A berendezés nem igényli a fénykibocsátás ellenőrzését, mivel a LED-ek a használati idő előre haladtával gyakorlatilag nem halványodnak.

***A szemvédő kizárólag kényelmi célokat szolgál, és könnyen bepattintható a maszk szemnyílásaiba. A szemvédő használata nem kötelező, mivel ez a maszk megfelel az összes vonatkozó szemészeti biztonsági szabványnak (IEC 62471:2006).**

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA Fénykibocsátó diódával (LED) működő készülék a fény spektrum vörös és közeli infravörös (NIR) tartományában bocsát ki fényenergiát, és az arc ráncainak kezelésére szolgál egy fotobiomodulációnak nevezett nem termikus mechanizmuson keresztül.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket kizárólag felnőttek részére, otthoni használatra terveztük.

ELLENJAVALLATOK, FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK



Ellenjavallatok

- **NE használja** egyidejűleg más személyekkel a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS arcmaszkot. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket egyszerre csak egy személy használhatja.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket a rendeltetésszerű használatban felsoroltakon kívül más panaszok kezelésére. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket nem vizsgálták a felsoroltakon kívüli egyéb állapotok kezelésére, ezért a kockázat ismeretlen.
- **NE alkalmazza** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha Ön terhes, terhességet tervez, vagy szoptat. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék hatását terhes vagy szoptató nőknél NEM vizsgálták, ezért a magzatra, az újszülöttnél vagy a terhes nőkre jelentett kockázat ismeretlen.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha fény okozta fejfájástól, migréntől szenved.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha allergiás a szilikonra. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék kezelőfelületei orvosi minőségű szilikonot tartalmaznak.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha Ön bármilyen genetikai szemészeti betegségben szenved. Ha bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy az Ön szemészeti problémájával használható-e a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék, akkor az alkalmazás előtt mindenképp forduljon egészségügyi szakemberhez.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha lupus erythematosusban, fényérzékeny ekcémában vagy albinizmusban szenved. Ha a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket lupus erythematosus, fényérzékeny ekcéma vagy albinizmus kezelésére használja, súlyos bőrreakciót okozhat.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha bármilyen fényérzékenységi rendellenességben (fényérzékenységben) szenved. Ha a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket használja, és fényérzékenységi rendellenességben szenved, súlyos bőrreakciót okozhat.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha olyan gyógyszert szed, amely fényérzékenységet okozhat. Ha a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket használja, és olyan gyógyszert szed, amely fényérzékenységet okozhat, súlyos bőrreakciót okozhat.
- **A fényérzékenységet okozó gyógyszerek listáját a következő weboldalon találja:**
<https://uk.qmsmedicosmetics.com/products/derma-expert-led-light-treatment>.

 **A fényérzékenység** a különböző gyógyszerek gyakori mellékhatása. Ezek közé tartozhatnak bizonyos antibiotikumok, kemoterápiás gyógyszerek és vízhatók. Ha bizonytalan bármely Ön által szedett gyógyszerrel kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához.

 **A fentiekben fel nem sorolt egyéb anyagok is okozhatnak fényérzékenységet.**

- Gyakori példák ezekre az anyagokra a következők: Az orbáncfű, a kőszénkátrány, a dezodorok, az antibakteriális szappanok, a mesterséges édesítőszer, a naftalin (molyirtó), a kőolajtermékek, a mosószerben található fehérítőszer és a kadmium-szulfid (a tetoválás során a bőrbe fecskendezett vegyszer).



Figyelmeztetések

- A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék használata előtt el kell végeznie egy bőr érzékenységi tesztet. Kérjük, olvassa el a "Bőr érzékenységi vizsgálat" című fejezetet a teszt elvégzésének módjáról.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket olyan módon, amely nem felel meg pontosan a jelen használati utasításban leírtaknak. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék nem pontosan a jelen használati útmutatóban meghatározottak szerint történő használata nem került tesztelésre és bevizsgálásra, így a kockázat nem ismert.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket a gyártó által NEM meghatározott környezetben, mivel ez a készülék károsodását vagy a felhasználó sérülését okozhatja.
- **Azonnal kapcsolja ki** és távolítsa el a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha forrónak érzi, vagy ha a bőre kellemetlenül meleg. NE folytassa tovább a kezelést, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
- **Hagyja abba** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék használatát, ha fejfájást vagy látászavarokat észlel a kezelés alatt.
- **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket anélkül, hogy a kezelés előtt eltávolítaná a szokásos krémeket, testápolókat vagy sminket. Az ezekben a termékekben található egyes összetevők fényérzékenységet okozhatnak, vagy csökkenthetik a kezelés hatását. Ha a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket anélkül használja, hogy eltávolítaná bőrápoló termékeit, bőrreakciót okozhat, vagy csökkentheti a kezelés hatását.
- **SOHA ne használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket víz közelében, vagy olyan helyen, ahol víz kerülhet a készülékre. **NE használja** a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha úgy gondolja, hogy vízzel érintkezett.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Tartsa a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket forró felületektől vagy közvetlen napfénytől távol.
- NE próbálja meg semmilyen módon módosítani, átalakítani a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket. A módosítással, átalakítással érvényét veszti a garancia, és a rendszer újbóli használatakor áramütést okozhat. A rendszer nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.
- NE használja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha a maszk, a vezérlő, a töltőcsatlakozó, a csomagolás vagy a kábel bármilyen módon sérült.
- NE használja tovább a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha az kopás, elhasználódás miatt az anyag sérülésének bármilyen jelét mutatja. Ha betartja a készülékre vonatkozó tisztítási és karbantartási előírásokat, akkor a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék élettartama minimálisan 2 év.



Általános biztonság

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék elektromos készülék, amely bizonyos körülmények között áramütésveszélyt jelenthet a felhasználó számára. Kérjük, olvassa el alaposan ezt a felhasználói kézikönyvet, és kövesse a kézikönyvben megadott utasításokat a maximális biztonság érdekében a használat során.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad feltölteni. Más tápegységek használata nem biztonságos és áramütéshez vezethet.



Óvintézkedések

- NE nézzen közvetlenül a LED fényforrásba.
- A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket nem lehet töltés közben használni.
- Minden használat előtt, a készülék kikapcsolt állapotában tisztítsa meg a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék arcmaszkját. Minden felületet a tisztítási utasítások szerint tisztítson meg.
- NE használjon a tisztítási útmutatóban megadottakon kívül más tisztítószert. Más tisztítószerek használata károsíthatja a maszkot.
- A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot szobahőmérsékleten, száraz körülmények között, közvetlen napfénytől védve tárolja.
- NE használja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot közvetlen napfényben.
- Legyen óvatos, amikor a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket kisgyermek és háziállatok közelében használja. Az elektromos kábelek fulladásveszélyt jelenthetnek, és fennáll a tűz és az égési sérülések veszélye, ha a gyermekek rosszul kezelik a készüléket.
- NE tegye ki a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket erős ütéseknek vagy rezgéseknek, hogy elkerülje a készülék károsodásának kockázatát, ha a készülék megsérül, ne használja tovább.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

- Ellenőrizze, hogy a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék tápegységén feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek, mielőtt csatlakoztatja, hogy elkerülje az áramütés vagy a készülék maradandó károsodásának veszélyét.
- Ellenőrizze, hogy a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék tápegysége megfelelően be van-e illesztve a fali aljzatba, és jól csatlakoznak-e, ellenkező esetben fennáll a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék tápegység felforrósodásának és tűz vagy égési sérülések veszélye.

KOCKÁZATOK ÉS VÁRHATÓ KEDVEZŐ HATÁSOK



Lehetséges kockázatok

Ez a lista nem teljes, de felsorolja a készülék használata során fellépő, leginkább valószínűsíthető káros hatásokat.

- Közvetlenül a kezelés után a bőr kipirosodhat. A bőrnék 1-2 órán belül ismét természetes állapotba kell kerülnie.
- Egyes felhasználók bőrhámlásról, ehhez kapcsolódó viszketésről és szárazságról számoltak be. Ez átmeneti és néhány napon belül megszűnik.
- Közvetlenül a fénykezelés után átmeneti fejfájás jelentkezhet.

Bár ez a készülék a látható és infravörös fény olyan mennyiségét bocsátja ki, amely a bőrre nézve biztonságosnak tekinthető, ha a készülék használata után nemkívánatos reakciót tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Ha olyan mellékhatást tapasztal, amely nem a fent leírtak szerint jelentkezik, vagy a fent leírtaknál súlyosabb, kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon egészségügyi szakemberhez és az iSMART Developments Limited-hez vagy az Ön szolgáltatójához és az Önt képviselő illetékes hatósághoz, ha ezt szükségesnek tartja.

Várható kedvező hatások

Azok az emberek, akik legalább 6 héten keresztül heti 3-5 alkalommal részesültek DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS kezelésben, az arc teljes felületén található ráncok csökkenéséről, valamint a szemkörnyék és a bőr tónusának és feszességének javulásáról számoltak be.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

Kicsomagolás és feltöltés

Csomagolja ki a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, és ellenőrizze a készülék leírásában leírt alkatrészeket.

Ellenőrizze szemrevételezéssel az alkatrészeket és a csatlakozásokat. Küldje vissza a készüléket a szállítójának, ha úgy gondolja, hogy a készülék vagy a csatlakozó alkatrészek vagy bármelyik részegység sérült, vagy korábban már használták.

NE használja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha úgy veszi észre, hogy a készülék vagy a csatlakozó alkatrészek vagy bármelyik részegység sérült.

Feltöltés

Használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülékhez egy lítium-ion polimer akkumulátort tartalmazó vezérlőegység tartozik. Ne használja a maszkot, ha a vezérlő csatlakoztatva van a tápegységhez és töltődik; ekkor a LED-ek nem fognak világítani.

- A vezérlő töltéséhez dugja be a tápegységből származó USB-C kábelt a vezérlőbe.
- Helyezze be a tápegységet egy megfelelő konnektorba, és győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat áramellátása be van kapcsolva.
- A vezérlő LED-jei villogni fognak, mely a töltést jelzi. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha a vezérlőn lévő három jelző LED világít.

Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor legalább 10 kezelésre elég energiát biztosít. A lítium akkumulátor élettartama maximalizálható, ha rendszeres használat során hagyja, hogy teljesen feltöltődjön, majd teljesen lemerüljön.

Ha a jelző LED-ek nem világítanak, kérjük, tölts fel a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket.

Ha a jelző LED-ek nem világítanak töltés közben, akkor a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék hibás lehet. Kérjük ez esetben olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt.

Csatlakoztatás a vezérlőegységhez

Csatlakoztassa a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket úgy, hogy az arcmaszk USB-A csatlakozóját behelyezi a vezérlő USB-A portjába.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

BŐR ÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT



Az első kezelés előtt el kell végeznie egy érzékenységi tesztet, hogy kiderüljön, érzékeny-e a készülék használata során keletkező fényre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket a vezérlőhöz.
2. Tisztítsa meg a bőrt a karja belső felén.
3. Helyezze a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket a karja belső felére (a fénykibocsátó diódák a bőr felé néznek).
4. Kapcsolja be a vezérlőt, és hagyja, hogy a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS kezelés teljes 10 perces kezelési programja végigfusson.
5. Bármikor, ha a bőrét forrónak érzi vagy kényelmetlenül érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
6. A kezelés után várjon legalább 6 órát.
7. Ha bőre a karja belső felén vörös vagy viszket, akkor a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS kezelés nem megfelelő az Ön számára. Küldje vissza a készüléket a vásárlás helyére 30 napon belül.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS MASZK HASZNÁLATA



Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) és az elektromágneses mezők (EMF) figyelembe vételével a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket az interferencia elkerülése érdekében távol kell tartani a rádiófrekvenciás (RF) berendezésektől.

Kezelésre vonatkozó ajánlások:

- - A legjobb eredmény elérése érdekében hetente 3-5 napon át alkalmazza a kezelést legalább 6 héten keresztül.
- - A fenntartó kezelést szükség szerint, az életmódnak és a bőr állapotának megfelelően kell elvégezni.

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszk felhelyezése

- A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszk két állítható tépőzáras fejpánttal és két további állítható résszel rendelkezik a maszk homlokán és állán, amelyek lehetővé teszik, hogy a maszk kényelmesen és szorosan illeszkedjen.
- A maszk felhelyezéséhez a pántokat a maszk mindkét oldalán lévő bemeneti nyílásokon keresztül kell átfűzni. Hurkolja a pántokat a feje köré, és rögzítse stabilan.
- Állítsa be a homlok- és állrészeket a tökéletes illeszkedés érdekében. A legjobb eredmény elérése érdekében a maszkot a lehető legközelebb kell illeszteni a homlokhoz és az állhoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kezelés kivitelezése

1. Tisztítsa meg alaposan a bőrt, hogy eltávolítsa a mindenpos bőrápolás során használt készítményeket.
2. Igény szerint helyezze be a szemvédő elemet.
3. Helyezze a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot az arcára, és rögzítse a tépőzáras pántokkal.
4. Állítsa be a maszk áll- és homlok részét a tökéletes illeszkedés érdekében.
5. Csatlakoztassa a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot a vezérlőhöz, és kapcsolja be a vezérlőt. A készülék tíz perces kezelési idő után kikapcsol. A kezelést bármikor leállíthatja a vezérlőn lévő ON/OFF gomb megnyomásával.
6. Vegye le a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS maszkot, és alkalmazza a szokásos bőrápolót.
7. Tisztítsa meg a maszkot egy vizes törölkendővel. Ügyeljen arra, hogy a készülék a tisztítás során NE legyen töltés alatt.
8. Ismételje meg a kezelést hetente 3-5 alkalommal legalább 6 héten keresztül.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A lítium akkumulátor élettartama maximalizálható, ha rendszeres használat során hagyja, hogy teljesen feltöltődjön, majd teljesen lemerüljön.
- Tárolja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket szobahőmérsékleten, száraz körülmények között. Használja a mellékelt tárolózsákokat.
- Kerülje a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék poros körülmények között, közvetlen napfényben vagy nedves és páros körülmények között történő tárolását.
- NE használja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha az a "Műszaki specifikációban" megadottakon kívüli környezeti feltételeknek volt kitéve.
- A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.
- Minden használat előtt, a készülék kikapcsolt állapotában tisztítsa meg az arcmaszkot az alábbi tisztítási utasítások szerint.
- Ha betartja a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülékre vonatkozó ápolási és karbantartási előírásokat, akkor a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék élettartama legalább 2 év.
- Ne használja tovább a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket, ha az elhasználódás miatt az anyagon bármilyen sérülés jelei mutatkoznak.

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék és a vezérlő le van választva az elektromos hálózatról.
- Tisztítsa meg a maszk átlátszó (arcoldali) felületét és a maszk hátoldalát vízbázisú törlerőcsökkentővel. A makacs foltokat 70%-os alkohollal történő óvatos áttöréssel lehet eltávolítani.

HULLADÉKKEZELÉS



NE dobja ki a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék bármely részét a háztartási hulladékgyűjtőbe.



A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék vezérlője lítium-ion-polimer akkumulátort tartalmaz. A környezet védelme érdekében kérjük, csomagolja be és küldje vissza a készüléket a gyártónak vagy annak képviselőjének az élettartam végén, vagy a készüléket a helyi irányelveknek megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa.



A külső csomagolás újrahasznosítható.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A maszk nem bocsát ki vörös vagy infravörös fényt. Az akkumulátor jelzőfénye nem világít.	A készülék akkumulátora nincs feltöltve	Csatlakoztassa a vezérlőt a töltőhöz, ügyelve arra, hogy a csatlakozók megfelelően csatlakoztatva legyenek, és hagyja töltődni, amíg a vezérlő három jelző LED-je világít, és abbahagyja a villogást.
A maszk nem bocsát ki vörös vagy infravörös fényt.	A maszk csatlakoztatva van a táp-kábelhez, töltődik.	Válassza le a vezérlő USB csatlakozóját.
Az akkumulátor jelzőfényei a vezérlőn nem világítanak, és töltés közben sem gyulladnak ki.	Hibás készülék	A visszaküldés megszervezéséhez forduljon a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben: headoffice@qmsmedicosmetics.com
A maszk nem bocsát ki vörös vagy infravörös fényt a vezérlő teljes feltöltése után sem.	Hibás készülék	A visszaküldés megszervezéséhez forduljon a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben: headoffice@qmsmedicosmetics.com
A LED-ek NEM kapcsolnak ki 10 perc után.	Hibás készülék	A visszaküldés megszervezéséhez forduljon a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben: headoffice@qmsmedicosmetics.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Probléma	Ok	Megoldás
A vörös és infravörös LED-ek folyamatosan villognak a kezelés során.	Hibás készülék	A visszaküldés megszervezéséhez forduljon a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben: headoffice@qmsmedicosmetics.com

Ha a javasolt intézkedések nem oldják meg a problémát, vagy a probléma megismétlődik, és a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék a jótállási időn belül van, kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a headoffice@qmsmedicosmetics.com e-mail címen.



- **NE** kíséreljen meg további vizsgálatokat végezni.
- **NE** próbálja meg semmilyen módon átalakítani a DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléket. A készülék átalakítása esetén a garanciája érvényét veszti. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék átalakítása áramütést okozhat a rendszer újbóli használatakor. A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS rendszer nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.

CÍMKÉ

A készülékhez mellékelt címkén a következő információk szerepelnek.

- A gyártás dátuma
- Modellszám és tételkód
- Működési környezet

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- Modellszám: TN2332
- Programidő: 10 perc +/- 11 másodperc
- Hullámhossz: 630 nm és 830 nm +/- 10 nm és 1070 nm +/- 20 nm.
- Maximális kimeneti intenzitás: 30mW/cm2
- Működési hőmérséklet: 0°C és 30°C között
- Tárolási és szállítási hőmérséklet: -5°C és 55°C között.
- Működési páratartalom: 30% és 95% között, páralecsapódás nélkül.
- Tárolási és szállítási páratartalom: 20% és 85% között páralecsapódás nélkül.
- Elektromos bemenet a hálózati adatterről: 100-240Vac/50-60Hz. 0.25A
- Elektromos kimenet; 5V, 1A
- IP22

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készüléken és a hozzá tartozó csomagoláson, valamint a használati útmutatóban számos biztonsági figyelmeztetés található. Ezen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása az alábbi veszélyek közül egyet vagy többet eredményezhet: áramütés és/vagy tűz.



Figyelem! Veszély!



A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék használata előtt feltétlenül olvassa el és értse meg a felhasználói kézikönyvben található összes információt.



A DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék használatához olvassa el a használati útmutatót.



Alkalmazott alkatrész típusa BF.



The DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS készülék egy többször használható, egy személy kezelésére alkalmas eszköz.



Megfelel az EU egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásokról szóló irányelveinek. A CE az európai megfelelőség (Conformité Européenne) rövidítése.



Megfelel az Egyesült Királyság egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványokra vonatkozó irányelveinek. Az UKCA az UK Conformity Assessed (Egyesült Királyságbeli megfelelőség-értékelés) rövidítése.



Gyártó.



Gyártás dátuma..



Tartsa szárazon.



Gyártási szám.

A készülék sorozatszáma:



(**TN2332**). Batch kód.



A készülék egyedi azonosítója.



DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK orvosi segédeszköz (USA-ban és Ausztráliában)



Gyártás helye: Kína.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.



Megadott hőmérséklettartományon belül használandó.



Megadott páratartalom-tartományon belül használandó.



A külső csomagolás újrahasznosítható.

IP22

A készülék védett a 12,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd tárgyakkal (például ujjakkal) szemben, valamint a függőleges vízcseppekkel szemben, ha a készüléket 15 fokkal dönti.



A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékátrolóba. (2012/19/EU).



A készüléket csak a készülékhez mellékelt adapterrel lehet tölteni. Más adapterek használata nem biztonságos és áramütéshez vezethet. Az adapter a következő elektromos specifikációval rendelkezik: 100-240Vac, 50/60Hz. 0.25A. Elektromos kimenet: 5V.



CII. osztályú, kettős szigetelésű elektromos készülék.



A használati útmutatót elektronikus formában letöltheti az alábbi weboldalról:

<https://uk.qmsmedicosmetics.com/products/derma-expert-led-light-treatment>

GARANCIA

Általános garancia:

Normál használat esetén a termékre az eredeti vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk az anyag- és gyártási hibák ellen.

Garanciát érvénytelenítő körülmények:

A lítium akkumulátorra az eredeti vásárlástól számított 1 év garanciát vállalunk az anyag- és gyártási hibák ellen. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik.

Ez a garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra:

- Baleset, helytelen használat, visszaélés vagy átalakítás.
- illetéktelen személyek által végzett szervizelés
- Nem megfelelő áramforráshoz való csatlakoztatás
- Nem engedélyezett tartozékokkal való használat

DERMA EXPERT LED FÉNYTERÁPIA

Mi a teendő, ha a termék hibás

Ha a termék a jótállási időn belül meghibásodik, forduljon a termék vásárlásának helyéhez.

Az iSMART Developments Limited vagy annak hivatalos forgalmazója fenntartja a jogot, hogy a hibás terméket a jelenleg elérhető legkompatibilisebb termékkel cserélje ki.

Az iSMART Developments Limited vagy annak hivatalos forgalmazói nem vállalnak felelősséget a termék használatából eredő véletlen, különleges vagy következményes károkért. Minden hallgatólagos garancia, beleértve, de nem kizárólagosan, az alkalmasságra és az eladhatóságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, az eredeti vásárlás időpontjától számított egy évre korlátozódik.

Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és országonként eltérő egyéb jogokkal is rendelkezhet. Egyes országok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, illetve a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások és kizárások közül néhány nem vonatkozik Önre.

Ez a garancia minden más, írásban vagy szóban vállalt garancia helyébe lép, függetlenül attól, hogy azt megerősítéssel, ígérettel, leírással, rajzzal, modellel vagy mintával fejezik-e ki. Ezennel kizárunk minden, a jelen garancián kívüli, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat.



Manufactured by:

iSMART Developments Limited
129 Green Lanes
Wylde Green
Birmingham
B73 5LT
United Kingdom

Distributed by:

QMS Medicosmetics GmbH
Siemensstrasse 11
D-79331 Teningen-Nimburg
For UK: ADSL, TQ4 7QN, U.K.
qmsmedicosmetics.com